

# ようこそ!ことばの実験室へ




言語科学教室には、言葉の産出や理解の仕組みを探るための実験装置がたくさんあります。 2年生から3年生にかけて計測・データ解析実習があるので、初めてでも安心して取り組めます。

# 

私たちの脳内では神経細胞が絶えず電気信号を発生させ、さまざまな情報の伝達を行っています。頭皮上に電極を取り付けると、こ の活動をリズムを持った波として記録できます。これを脳波(electroencephalogram: EEG)といいます。 私たちが言葉を話し たり、理解する際に現れる脳波は、それ以外の脳波に比べると非常に小さいのですが、一定の手続きで解析を行うことで、その脳波 を取り出すことができます。脳波計測は時間的に高い精度で脳活動の変化を捉えることができるので、「私たちが言葉を理解したり話 たりするとき、脳の中でいつどのようなことが起きているのか」を調べる上で、非常に有用な実験方法とされています。2年生のときに、 自分の脳波を測って解析してみる授業があります。




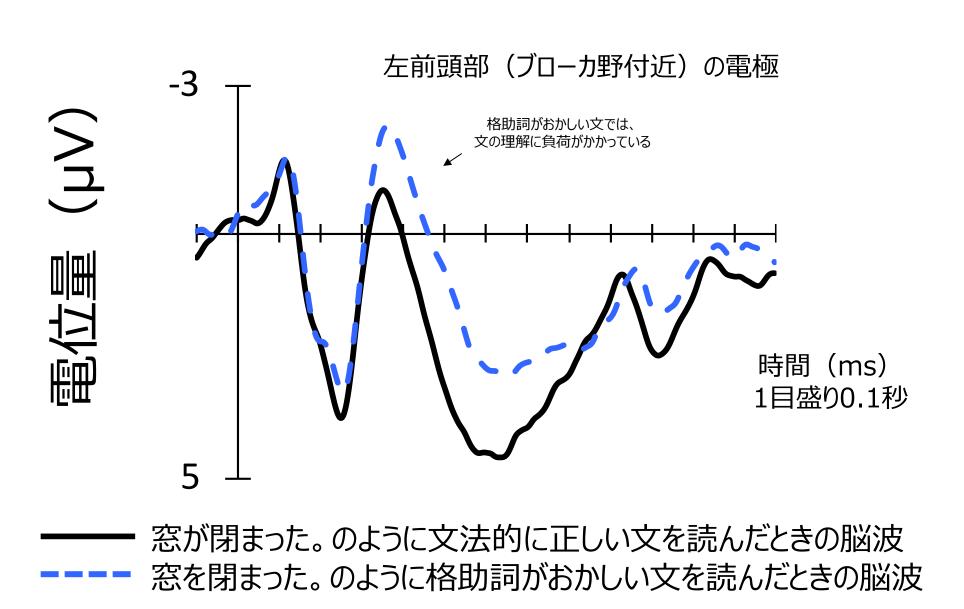

Eye link 1000 Plus

視線計測装置



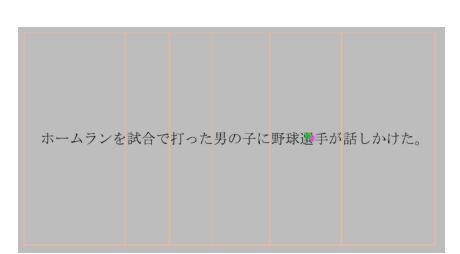




### めは規制

視線計測は、カメラを使って、ひとの目の動きを測る実験方法です。言語科学教室にある視線計測装置は、1秒間に1000~2000 回のペースでデータが取れる高性能な装置で、文章を読解しているときのような、目が高速で動くときでもその視線を正確に捉えることが できます。文章を読むときにどこで時間がかかるのか、読み戻るのかなどを分析することで、ひとが言葉を理解する仕組みを調べることがで きます。


視線計測装置は、瞳孔(黒目の部分)の大きさを測ることもできます。瞳孔は、周囲の光の強さによっても変化しますが、認知的な活動 (物事考えたり記憶したりすること)にかかる負荷に応じて大きくなるという性質があります。この性質を利用すれば、ひとが言葉を話すときに、 どのような文の産出が難しいかを知ることができ、発話の仕組みを調べることができます。視線計測は3年生で実習があります。

#### 近赤外分光腦機能計測。

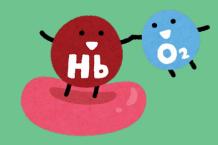

頭皮上に近赤外線を照らすと、頭蓋骨を通過して脳の表面にぶつかり、その一部は再び頭皮上に戻ってきます。このとき、どの程度、近 赤外線が戻ってくるかは、血液中の酸化ヘモグロビンと脱ヘモグロビンの量によって決まります。脳は、活動すると酸素を消費するため、酸 化ヘモグロビンを含む赤血球が血液中を移動し、活動した脳の場所に酸素を運んでいるので、近赤外分光脳機能計測装置を使って、 反射した近赤外線の量を計測すれば、脳のどの場所がどの程度、活動したかを調べることができます。

この計測方法は安全性が高く、乳幼児を対象とした実験をすることもできます。例えば、大人は、音声を知覚すると左半球が優位に働 きますが、近赤外分光脳機能計測を用いた研究によると、生後1週間未満の新生児でもその傾向が見られることがわかっています。

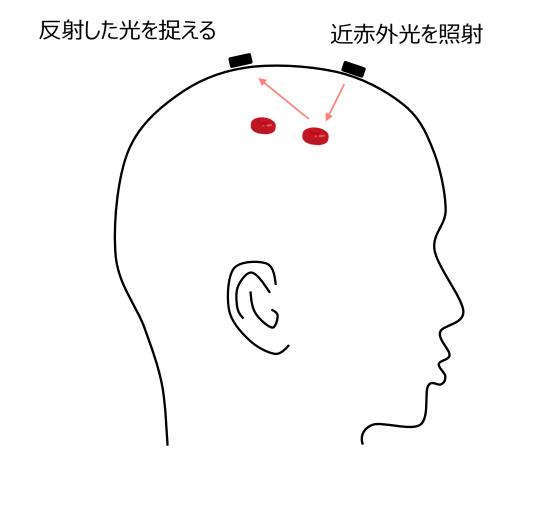



# 経頭善磁気刺激法

私たちの認知的な活動は、神経細胞による電気信号によって行われているため、頭 皮上に設置した電極から脳の表面にむかって安全に微弱な電気刺激を送ると、 時的に脳の活動を高めたり、抑制させたりすることができます。このような実験を通し て、脳のどの場所が、どのような機能をもつのかを調べることがでます。

経頭蓋磁気刺激は基礎研究だけでなく、吃音(きつおん)を一時的に抑制させた り、外国語学習(単語の記憶)を促進させるような応用研究も行われています。